

Information sheet for mounting the CB Single Use head
Notice de montage de la tête CB Single Use

#19312/XXX


IMPORTANT

Contents

Composition du Pack

Microkeratome head with blade

Tête de microkératome avec sa lame

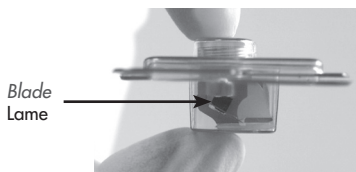



**CHECK FOR
UNDAMAGED AND
UNOPENED PACK.
THIS PACK IS
STERILE AND FOR
SINGLE USE.**

**READ THE MORIA
CB
MICROKERATOME
USER MANUAL
CAREFULLY.**

**VÉRIFIER
L'INTÉGRITÉ DU
SACHET PROTEC-
TEUR INDIVIDUEL
DE STÉRILITÉ
AVANT USAGE.
CE PACK EST
STÉRILE ET À
USAGE UNIQUE.**



**VOIR LES
CONSIGNES
D'UTILISATION
DÉTAILLÉES ET LES
AVERTISSEMENTS
FIGURANT DANS LE
MODE D'EMPLOI DU
MICROKERATOME
MORIA CB.**

- 1** Remove inner plastic pack from outer peel pouch.
Retirez le pack du sachet protecteur.
- 2** Place pack with blade side down.
Placez le pack de façon à ce que le côté de la lame soit en bas.
- 3** Remove top of pack.
Ouvrez la partie supérieure du pack.

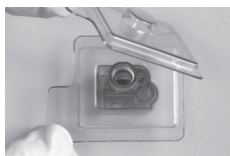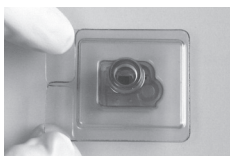


- 4** Keep head in pack while screwing into turbine.
En maintenant la tête dans le pack, vissez-la sur la turbine.


**Caution : U.S.
(FEDERAL) Law
restricts this device
to sale by or on
the order of a phy-
sician**

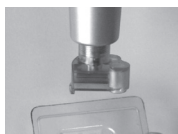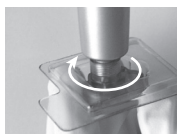

- 5** *While assembled, inspect blade under microscope.*
Après l'assemblage, inspectez la lame au microscope.
- 6** *Activate turbine to check that blade is engaged and oscillates.*
Activez la turbine afin de vérifier que la lame est bien engagée et oscille correctement.
- 7** *Before the keratectomy, please make sure that the head slides properly in the selected suction ring.*
Avant la kératectomie, s'assurer que la tête glisse dans l'anneau choisi sans difficulté.

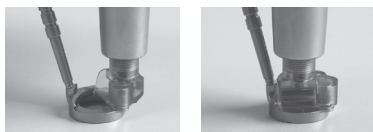

- 8** *After use, place the head back in the packaging and unscrew it. Discard everything.*
Après usage, remettre la tête dans le pack et dévisser la tête. Détruire l'ensemble.

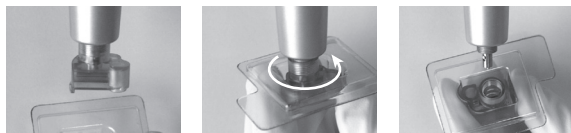

WARNING

Use the CB Single Use heads exclusively with accessories manufactured by Moria for the CB microkeratome; use of other accessories can damage the microkeratome and may cause significant patient injuries. Please read the user manual of the Moria CB microkeratome before use.

AVERTISSEMENT

N'utiliser les têtes CB Single Use qu'avec les différents éléments fournis par MORIA pour le microkératome CB ; l'emploi de tout autre élément que ceux fournis par MORIA risquerait d'endommager le microkératome et d'être cause de graves blessures pour le patient. Il est impératif de se reporter au mode d'emploi pour l'utilisation du microkératome.

MORIA#65001-E-12.2016

Moria

MORIA SA
FRANCE
+33 (0) 1 46 74 46 74
moria@moria-int.com
www.moria-surgical.com



MORIA Inc
USA
(800) 441 1314
moria@moriausa.com
www.moria-surgical.com
MORIA JAPAN KK
JAPAN
+ 81 3 5842 6761
moria@moriajapan.com
www.moriajapan.com

MORIA in CHINA
CHINA
+ 86 21 5258 5066
moria_shanghai@yahoo.com
www.moria-surgical.com.cn